




CHEMOTECHNIQUE DIAGNOSTICS

Prueba de parche Haptens

Chemotechnique ofrece la gama más amplia de Haptens de prueba de parches de alta calidad disponibles en el mercado . Los 555+ preparaciones diferentes están disponibles para su compra en juegos de la serie o como preparaciones individuales . La composición de las diversas series de referencia, así como las series ocupacionales y de especialistas adicionales, se ha seleccionado cuidadosamente en estrecha colaboración con los principales grupos de investigación de dermatitis de contacto.

De la máxima calidad

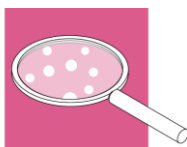

Los haptenos se preparan utilizando tecnología de punta mediante la molienda / tamizado de materias primas de alta pureza hasta un tamaño de partícula extremadamente fino. Las partículas pequeñas se homogeneizan con vaselina blanca de grado de alta pureza o con los vehículos líquidos de pureza más alta apropiados.

Serie completa de línea de base



Los haptens en una serie de referencia forman la base para todas las pruebas de parches de rutina. Además de la Serie internacional de referencia completa (ICB-1000) , hemos desarrollado varias Series de referencia regional y nacional en cooperación con clínicas locales y grupos de investigación. Estas Baseline Series personalizadas permiten realizar pruebas de parches de rutina eficientes con alta relevancia.

Precarga



Prueba de parche no volátil Los Haptens pueden precargarse en las unidades de prueba de parche IQ Ultra™ o IQ Ultimate™ y almacenarse hasta dos semanas antes de la prueba de prueba si se almacenan refrigerados, con tapas selladas y en bolsas herméticas. Las preparaciones de hapteno volátiles que no se pueden precargar están marcadas con el símbolo.



Precarga de un IQ Ultimate™ utilizando el dispositivo de aplicación

Baterías de haptenos

- Estándar Europea
- Estándar de referencia internacional
- Panadería
- Corticosteroide
- Cosméticos
- Reacción adversa cutánea a medicamentos
- Odontología
- Material odontológico: pacientes
- Material odontológico: personal
- Resinas epoxidas
- Fotoalérgenos europeo
- otoalérgenos europeo extendida
- Fragancias
- Peluquería
- Norma internacional
- Isocianatos
- Úlcera de pierna
- Medicamentos
- Metales
- (Met)acrilato: adhesivos, dental y otros
- Series de (met)acrilato: uñas postizas
- Series de (met)acrilato: imprenta
- Aceite y refrigerante
- Fotografía
- Plantas
- Plásticos y colas
- Aditivos de la goma
- Calzado
- Protectores solares
- Tintes y acabados textiles
- Haptenos diversos
- Haptenos complementarios
- Baterías estándar nacionales

Haptenos: ~150 pacientes por batería con un uso normal. Conservar en un lugar oscuro a 5-8 °C.

