

FICHA TÉCNICA

Producto

KN95 MASCARA FACIAL PROTECTORA (RESPIRATOR)



allergika

chile

FABRICADO POR:

Guangzhou bofite safety protective equipment Co., Ltd
Workshop 8, Yinsha Industrial Zone, Xintang Town, Zengcheng District,
Guangzhou China

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

Allergika Chile SPA
Badajoz 130 of 805 Las Condes Santiago
www.allergikachile.com



DESCRIPCION

Nombre Producto	KN95 Mascarilla Facial Protector	
Standard:	GB2626-2006 KN95	
Standard Test Report	EN 149:2001+A1:2009	
Clasificación	FFP2	
Material:	4 capas	
	Capa superficial	tela no tejida hilada con polipropileno
	Segunda y tercera capa intermedia	tejido fundido 50GSM
	Capa interior	tela no tejida; hilada con polipropileno
Características	Elimina el 95% de las partículas en el aire y contaminación.	
	Previene salpicaduras, partículas y aerosoles no basados en aceite.	
Color:	Blanco	
Envase:	50 piezas por caja	
Peso:	20 grs	
Tipo:	lazo detrás de la oreja	
Resistencia insp	0,7 bar	
Resistencia esp	3.0 bar	
Rango de Filtración:	≥95% (partículas 0.075µm)	
Usos:	COVID-19, prevención de germenés, virus influenza, antipolución, antiempañamiento, anti PM-2.5	
Certificacion:	ISO / SGS / L.A / CE/	
Fabrica	ISO 9001	
	LA Mark PPE	
Conformidad Europea	 No. ICR Polska/P6301893	
FDA	 reg n° 878.404	

<https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfRL/rl.cfm?lid=666725&lpcd=MSH>

CARACTERISTICAS

Máscara plana, frente redondeado, con fijación tras oreja.

Cómoda de usar.

Arco nasal ajustable



PRESENTACION

Caja de 50 unidades



COLOCACION de la Mascarilla KN95



1. Saque la mascarilla de su envase y ajústela a su nariz y mentón.
2. Tome las tiras con ambas manos y simultáneamente fijela detrás sus orejas.
3. Ajuste el puente nasal presionándolo suavemente hasta que quede fijo
4. Con sus manos termine ajustando la mascarilla de manera que se adhiera a su cara.

Para retirar la mascarilla tómela desde los lazos tras las orejas, con ambas manos, y la mueve hacia delante de su cara. Nunca toque la parte frontal de la máscara con sus manos ya que puede contaminarse. Deposítela en un recipiente solo para desechar este material. Lave sus manos con jabón 40 segundos o alcohol gel antes y después del procedimiento.

USO

Este producto es para uso individual.

Se aprobó para una protección ante partículas mayores a 0.075 micrones. Cuando mantiene sus capas sin alterarse.

Durante su uso evite tocar la mascarilla con sus manos.

El uso de una mascarilla como la KN95 no implica que se dejen las otras medidas de seguridad como la distancia social, idealmente de 2 metros y el lavado de manos.

Reglamentos en aplicación en Chile regula el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos.

REUTILIZACION

Se entiende que su uso continuo es entre algunas horas y un día.

La mascarilla no debe lavarse ya que se separan sus capas.

No debe limpiarse con alcohol 70% ya que pierde sus características de filtración.

Hasta este momento no hay acuerdo en la reutilización de una mascarilla N95 o KN95, entre los distintos expertos. Debe considerarse que una mascarilla puede estar contaminada por virus durante su uso, de ahí que la reutilización puede transformarse en riesgo de contagio para quién la manipule después del uso.


Ante la escasez de estos dispositivos se han propuestos algunas opciones de sanitización de estas. Para ello ingrese a nuestro sitio web www.allergikachile.com donde encontrará sugerencias de expertos.



Regístrese en www.allergikachile.com. Ahí tendremos actualizaciones sobre el uso de las mascarillas, consejos y medidas de protección personal.

Consultas y cotizaciones contacto@allergikachile.com
WhatsApp +569 4002 0188

ANEXOS

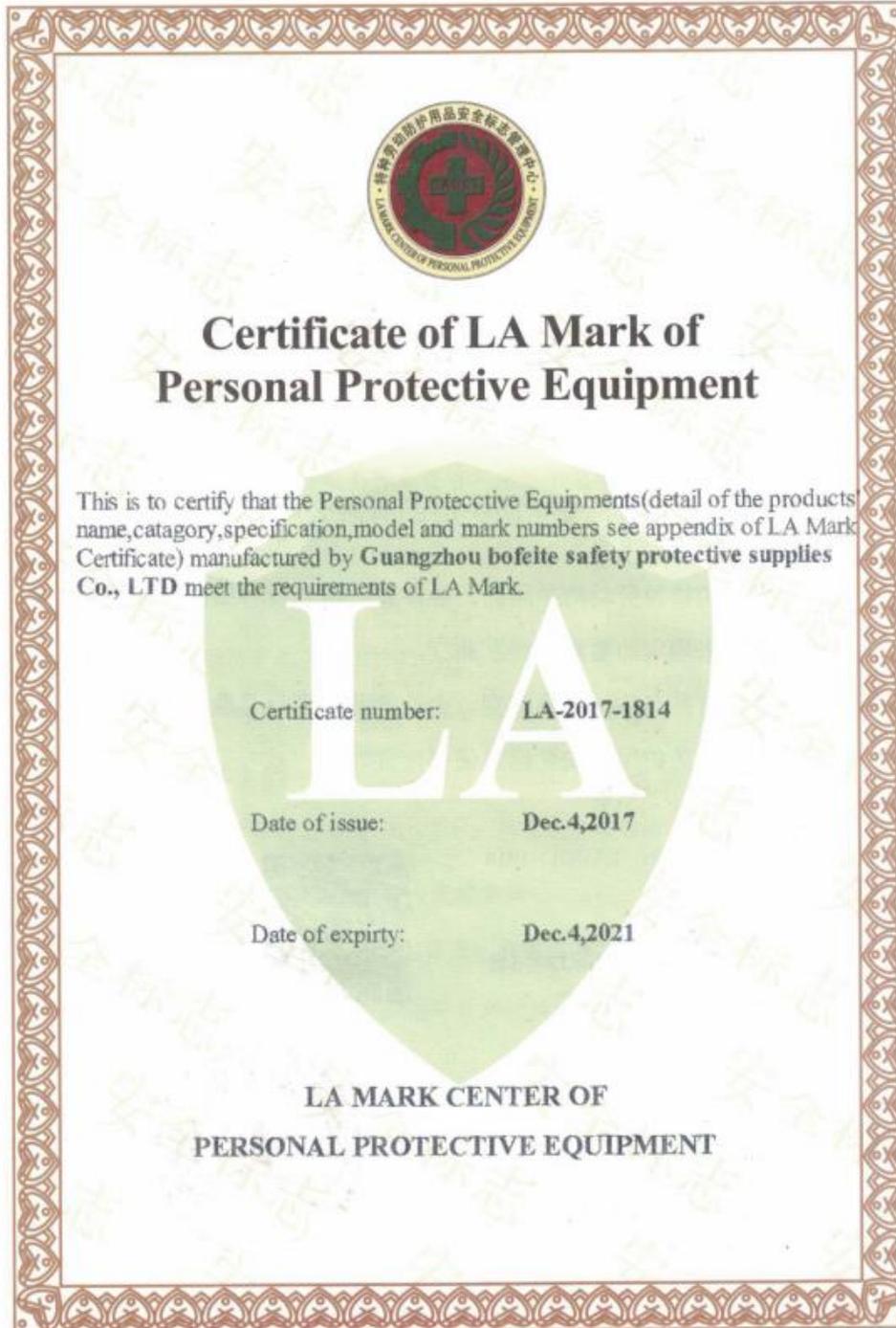

Supervised by China Academy of Safety Science and Technology

TEST REPORT
EN 149
Respiratory protective devices. Filtering half masks to protect against particles.
Requirements, testing, marking

Report Reference No.	CTO200326122MRS
Compiled by (+ signature).....	Laurent Wu
Approved by (+ signature).....	Mike Wang
Date of issue.....	Mar. 24, 2020
Testing Laboratory	SHENZHEN CTO TECHNOLOGY SERVICE CO., LTD
Address.....	9/F, Block B, 196 Tangtou Avenue, Langxin Community, shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China
Applicant's name	Guangzhou Bofeite Safety Protective Supplies Co.,Ltd
Address.....	First Floor (Part) ,Third Floor(Part), Fourth Floor And Fifth Floor(Part), No.8 Plant, Xingfu Road, Shapu Yinsha Industrial District, Xintang Town, Zengcheng District,Guangzhou City
Test specification:	
Standard.....	EN 149:2001+A1:2009
Non-standard test method.....	N/A
Test item description.....	Face Mask
Trade Mark.....	华特/HUATE
Model/Type reference.....	HT9510, HT9520
Manufacturer.....	Guangzhou Bofeite Safety Protective Supplies Co.,Ltd
Address.....	First Floor (Part) , Third Floor(Part),Fourth Floor And Fifth Floor(Part),No.8 Plant,Xingfu Road,Shapu Yinsha Industrial District,Xintang Town,Zengcheng District,Guangzhou City
Classification	FFP2 NR



